


Brännskade plåster

Pharmagel hydrogelförband fuktig sårhäkning

Behandling av brännsår och efterbehandling av brännskada*

- *Pharmagel är en transparent polyuretan gelkompress – 60% vatten*
- *Pharmagel Brännskade plåster kyler, lindrar och minskar smärta*
- *Kompressen har en självhäftande polyuretanfilm*
- *Applicera på brännsåret, täck hela sårytan*
- *Kompressen kan vara applicerad upp till 1 vecka*
- *Fuktig sårhäkning påskyndar bildandet av ny vävnad*
- *Minimerar ärrbildning och sårskorpa*
- *Fastnar inte i sår och har en god dämpande effekt*
- *Individuellt förpackade och steriliserade*
- *Läkeprocessen kan följas utan att avlägsna förbandet*
- *Tillåter fri passage av gaser och vattenånga*
- *Skyddar huden från uttorkning*
- *Pharmagel är vattentätt, möjliggör säker duschning*

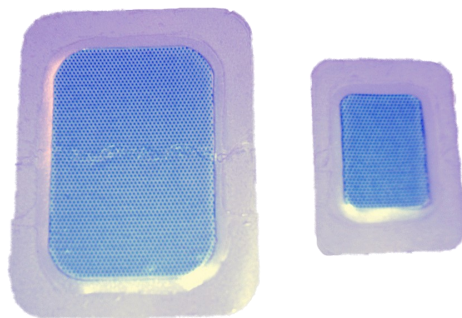

* En **brännskada** behandlas i första hand med **Burnaid** gel- och gelkompresser upp till **två** timmar. (alt. svalt vatten)

Med **Burnaid** uppnår man tre fördelar:

- 1) *Kylning för att minimera vävnadsskador,*
- 2) *Smärtlindring för ökad komfort*
- 3) *Minskar risken för tillstötande infektion.*

Efter detta har **Burnaid** "gjort sitt". För fortsatt sårhäkning används **Pharmagel** kompresser

Storlek: 45x65mm; 75x100mm

Art nr: 4565-C; 4575-C

STERILIE EO

CE
0120

AlphaMedic